

# Guide pratique

destiné aux patients  
pour l'auto-injection  
de SKYRIZI® 360 mg,  
solution injectable  
en cartouche



Vous pouvez vous injecter vous-même SKYRIZI® après avoir été formé à la technique d'injection sous-cutanée à l'aide de l'injecteur corporel.<sup>1</sup> Il est nécessaire de lire les instructions d'utilisation figurant dans la notice avant l'administration.

Cette brochure vous est destinée dans le cadre de votre traitement par SKYRIZI® 360 mg, solution injectable en cartouche. Elle vous explique comment préparer et vous auto-injecter le médicament. Si quelque chose ne vous semble pas clair, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, parlez-en avec votre médecin, votre infirmier(ère) ou votre pharmacien. Prenez le temps de soigneusement préparer et injecter SKYRIZI®.

Cette brochure n'est pas destinée à remplacer la notice d'information, mais constitue un matériel supplémentaire pour vous aider à injecter le médicament en toute sécurité. Veuillez toujours lire attentivement la notice d'information. Avant de commencer à utiliser SKYRIZI® chez vous, votre médecin ou votre infirmière vous montreront comment le préparer et l'injecter.

**Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier(ère). Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement sur le site <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.**

# Sommaire

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. SKYRIZI® en injection sous-cutanée, avec l'injecteur corporel</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>04</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• L'injecteur corporel de SKYRIZI®</li><li>• La cartouche de SKYRIZI® 360 mg solution injectable</li><li>• Conserver SKYRIZI® 360 mg solution injectable en cartouche</li><li>• Se préparer à l'injection sous-cutanée de SKYRIZI®</li><li>• Éliminer les déchets après injection</li></ul> |           |
| <b>2. L'injection sous-cutanée de SKYRIZI® étape par étape</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>1. Préparation du matériel</li><li>2. Préparation de l'injecteur corporel</li><li>3. Préparation de l'injection</li><li>4. Injection de SKYRIZI®</li><li>5. Fin du processus</li></ul>                                                                                                      |           |
| <b>3. Informations importantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>28</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Questions fréquentes</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| <b>4. Calendrier d'injection</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30</b> |
| <b>5. Certificat médical</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>35</b> |

1

2

3


4

5

# SKYRIZI® en injection sous-cutanée, avec l'injecteur corporel<sup>1</sup>

L'injecteur corporel de SKYRIZI®

## VUE AVANT

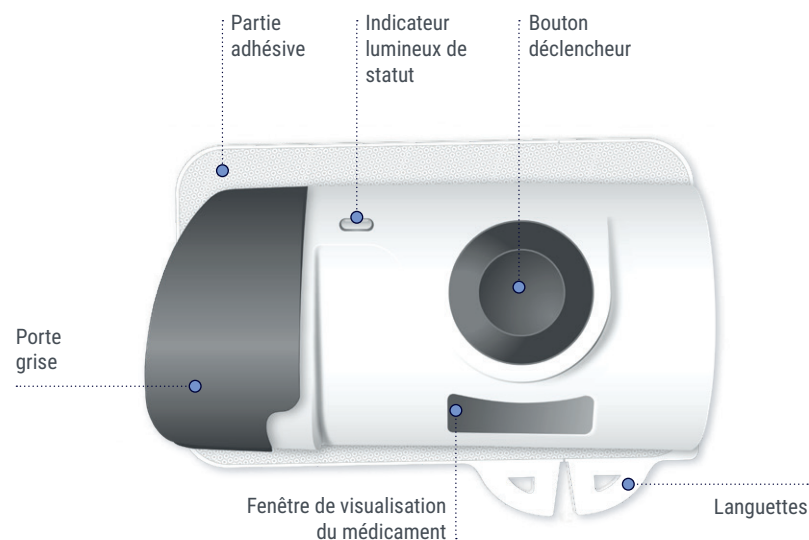


! La porte grise doit être légèrement ouverte. Le côté qui s'ouvre est nervuré.

✗ Ne pas fermer la porte grise si la cartouche n'est pas dans l'injecteur.

✗ Ne pas toucher le bouton déclencheur avant d'être prêt à procéder à l'injection.

## VUE ARRIÈRE

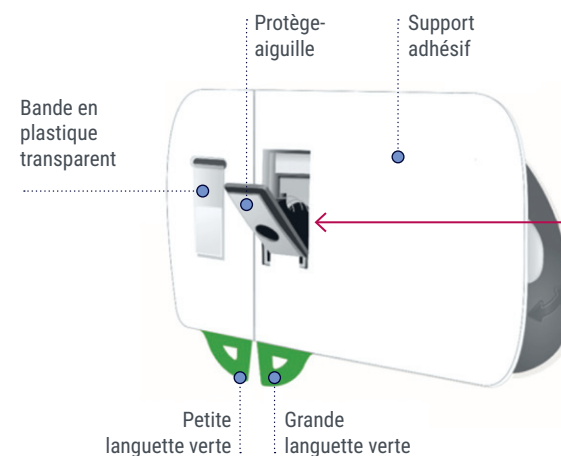

! Attention. Aiguille à l'intérieur (sous le protège-aiguille).

✗ Ne pas toucher la zone du protège-aiguille ou l'aiguille.

## VUE LATÉRALE



! Attention. Aiguille à l'intérieur (sous le protège-aiguille).


✗ Ne pas toucher la zone du protège-aiguille ou l'aiguille.

! Le côté qui s'ouvre est nervuré. La porte grise doit être légèrement ouverte.

✗ Ne pas fermer la porte grise si la cartouche n'est pas dans l'injecteur.

# SKYRIZI® en injection sous-cutanée, avec l'injecteur corporel<sup>1</sup>

La cartouche de SKYRIZI® 360 mg solution injectable

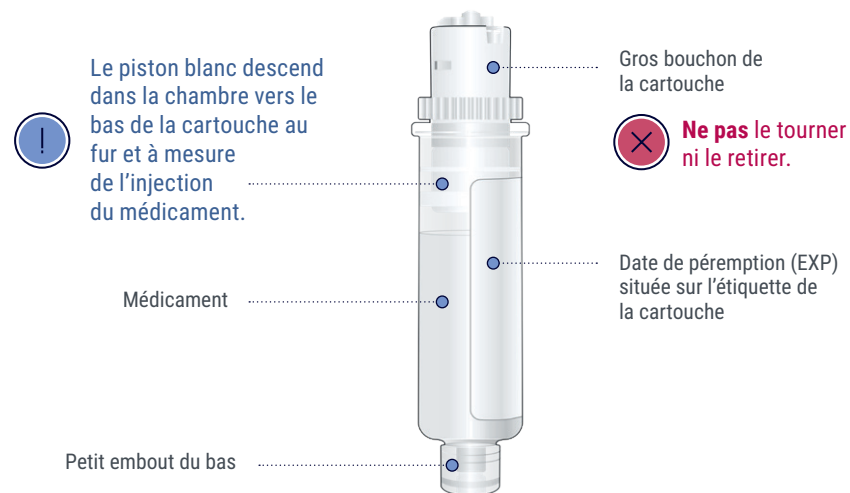

Conserver SKYRIZI® 360 mg solution injectable en cartouche



La substance active est le risankizumab. Chaque cartouche de SKYRIZI® contient 360 mg de risankizumab dans 2,4 mL de solution. Chaque injecteur corporel fourni avec la cartouche de SKYRIZI® est à **usage unique**.

## ! À faire



**Conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C),** dans l'emballage extérieur d'origine, à l'abri de la lumière. La cartouche peut être conservée en dehors du réfrigérateur (à une température **ne dépassant pas 25°C**) pendant **24 heures au maximum**.



Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

## ✗ À ne pas faire



**Ne pas congeler.**



**Ne pas agiter** la boîte, la cartouche, ni l'injecteur corporel.

# SKYRIZI® en injection sous-cutanée,

## avec l'injecteur corporel<sup>1</sup>

Se préparer à l'injection sous-cutanée de SKYRIZI®



Avant de procéder à une injection, vous devez recevoir une formation sur la façon d'injecter SKYRIZI®. Vous déciderez en concertation avec votre médecin si vous pouvez vous injecter ce médicament vous-même.

Ne vous injectez pas le médicament vous-même tant que vous n'avez pas été formé(e) par votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Un aidant peut aussi vous injecter le médicament après avoir été formé à l'utilisation de l'injecteur corporel.

En cas de difficulté de manipulation ou si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à interroger votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Veuillez lire attentivement la notice d'information avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

## Élimination des déchets après l'injection<sup>2</sup>

Vous réalisez vous-même vos injections, attention : vous êtes responsable de l'élimination de vos déchets !

En effet, certains de vos déchets présentent un risque pour vous-même et pour toute autre personne susceptible d'entrer en contact avec.

### 1. Qu'est-ce que les e-DASRI ?

Après utilisation, l'injecteur corporel de SKYRIZI® est considéré comme un Déchet d'Activités de Soins à Risque Infectieux avec électronique (e-DASRI). En effet, l'injecteur corporel de SKYRIZI® contient des piles, des composants électroniques et une aiguille potentiellement contaminée par des agents biologiques pathogènes qui représente alors un risque d'infection. Il ne peut pas suivre le circuit d'élimination classique des déchets. Il doit être collecté dans un collecteur violet spécifique et éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le cadre de votre traitement en auto-injection, vous devez vous munir de boîtes de collecte violettes e-DASRI pour vous aider à éliminer comme il se doit l'injecteur corporel après utilisation.

Celui-ci sera recyclé spécifiquement : séparation des piles, des composants électroniques, du plastique et du métal.

**En aucun cas les e-DASRI ne doivent être mélangés et jetés avec les ordures ménagères.**

Ils doivent être éliminés dans des **boîtes de collecte en carton violettes**. Seuls les cotons, lingettes antiseptiques et autres fournitures peuvent être jetées à la poubelle.

### 2. Comment se procurer ces boîtes de collecte violettes pour déchets de soins avec électronique (e-DASRI) ?

Ces boîtes de collecte violettes e-DASRI sont disponibles gratuitement dans les pharmacies, sur présentation de votre ordonnance.

Attention : si vous avez l'habitude d'utiliser des boîtes de collecte en plastique jaunes, celles-ci ne doivent pas être utilisées pour éliminer l'injecteur corporel de SKYRIZI®. Il est nécessaire de vous procurer des boîtes de collecte violettes.

### 3. Comment utiliser les boîtes de collecte violettes e-DASRI ?

- Ranger les boîtes de collecte violettes e-DASRI hors de portée des enfants.
- Déposer chaque injecteur corporel de SKYRIZI® après utilisation (avec la cartouche de médicament toujours à l'intérieur) dans la boîte de collecte e-DASRI.
- Ne pas remplir la boîte au-delà du trait supérieur.
- Lorsque la boîte est pleine, vous devez la fermer définitivement.
- Le délai de stockage de la boîte ne doit pas dépasser 3 mois après fermeture.

### 4. Où faut-il rapporter les boîtes de collecte violettes e-DASRI ?

Une fois la boîte de collecte e-DASRI pleine, déposez-la dans la pharmacie la plus proche. Attention, les collectivités (déchèteries) et autres points de collecte du réseau DASTRI ne participent pas à cette opération : seules les pharmacies peuvent recevoir ces collecteurs violets e-DASRI.




[www.dastri.fr/nous-collectons](http://www.dastri.fr/nous-collectons)



Plus d'info :  
[www.dastri.fr/dasrie](http://www.dastri.fr/dasrie)  
ou flashez ce QR code

# L'injection sous-cutanée de SKYRIZI® étape par étape<sup>1</sup>

## ÉTAPE 1 - Préparation du matériel

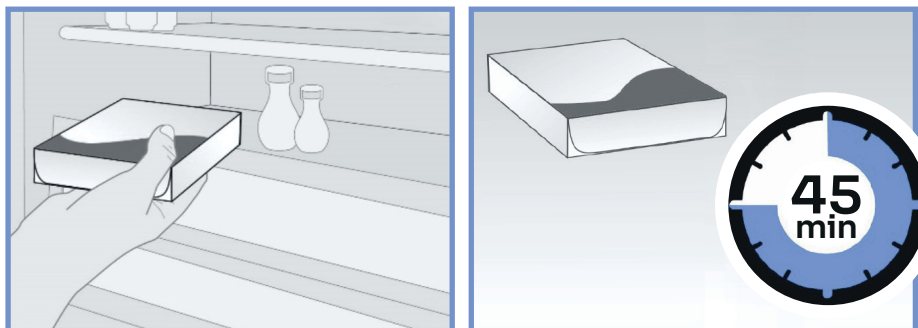

Sortez la boîte du réfrigérateur et laissez-la à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil, pendant **au moins 45 à 90 minutes** avant l'injection. L'injecteur corporel ne fonctionnera pas si SKYRIZI® n'est pas laissé à température ambiante pendant **au moins 45 minutes** pour se réchauffer.

**Il est important de conserver le numéro de lot de chaque boîte de SKYRIZI®.**

**À chaque nouvelle boîte de SKYRIZI®, notez la date et le numéro de lot (situé sur la boîte après "Lot") et conservez ces informations en lieu sûr.**



**Vérifiez la date de péremption ("EXP") sur la boîte.**



**Ne pas** utiliser SKYRIZI® si la date de péremption est dépassée.

**Ne pas** agiter la boîte, la cartouche ni l'injecteur corporel.

**Ne pas** retirer la cartouche ou l'injecteur corporel de la boîte tant que SKYRIZI® n'a pas atteint la température ambiante.

**Ne pas** réchauffer SKYRIZI® par un autre moyen.

Par exemple, **ne pas** le réchauffer au micro-ondes ou dans de l'eau chaude.



Pour visionner la vidéo montrant comment préparer et vous injecter le médicament, flashez ce QR code à l'aide d'un smartphone ou consultez le site <https://www.abbvie.fr/nos-traitements/page-produits/Skyrizi.html>.



**Rassemblez tout le matériel.**


Posez le matériel sur une surface plane et propre :

- La barquette en plastique contenant 1 injecteur corporel et 1 cartouche ;
- 2 compresses d'alcool (**non incluses dans la boîte**) ;
- 1 boule de coton ou 1 compresse de gaze (**non incluses dans la boîte**) ;
- Un collecteur de déchets spécifique à l'élimination des aiguilles (**non inclus dans la boîte**).


Lavez-vous les mains et séchez-les avec un essuie-main propre.

# L'injection sous-cutanée de SKYRIZI® étape par étape<sup>1</sup>

## ÉTAPE 1 - Préparation du matériel (suite)

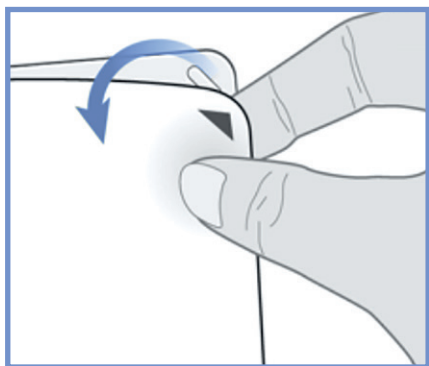


Localisez la flèche noire.  
Retirez l'opercule en papier blanc de la barquette.

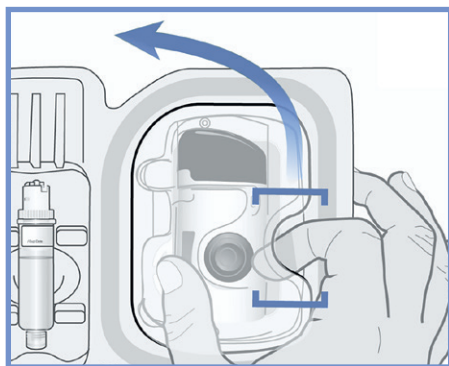

Localisez l'ouverture ronde sur le couvercle supérieur en plastique.  
Insérez l'index dans l'ouverture et placez le pouce sur la face opposée.  
Soulevez le couvercle pour le retirer et placez-le de côté.  
Ne pas toucher le bouton déclencheur gris avant d'être prêt à procéder à l'injection. Il n'est possible d'appuyer sur le bouton qu'**une seule** fois.



Pour visionner la vidéo montrant comment préparer et vous injecter le médicament, flashez ce QR code à l'aide d'un smartphone ou consultez le site <https://www.abbvie.fr/nos-traitements/page-produits/Skyrizi.html>.

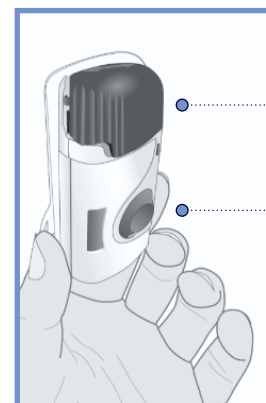

**Examinez l'injecteur corporel.**  
Vérifiez que l'injecteur corporel est intact et n'est pas endommagé.



La porte grise doit être légèrement ouverte.  
Si la porte grise ne s'ouvre pas, appuyez fermement sur les nervures (côté gauche de la porte) et faites pivoter la porte pour l'ouvrir.




**Ne pas** fermer la porte grise avant que la cartouche soit chargée.  
**Ne pas** utiliser l'injecteur corporel s'il est tombé, si des pièces manquent ou s'il est endommagé.  
**Ne pas** laisser l'injecteur corporel entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.  
**Ne pas** toucher la zone du protège-aiguille ou l'aiguille.  
**Ne pas** toucher le bouton déclencheur gris avant d'avoir placé l'injecteur corporel contenant la cartouche sur la peau et d'être prêt à procéder à l'injection.  
Si vous appuyez sur le bouton déclencheur gris avant d'avoir placé l'injecteur sur votre corps, celui-ci ne pourra plus être utilisé. Dans ce cas, adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère afin de déterminer la conduite à tenir.



Il n'est possible d'appuyer sur le bouton de déclenchement qu'**une seule** fois.

# L'injection sous-cutanée de SKYRIZI® étape par étape<sup>1</sup>

## ÉTAPE 2 - Préparation de l'injecteur corporel

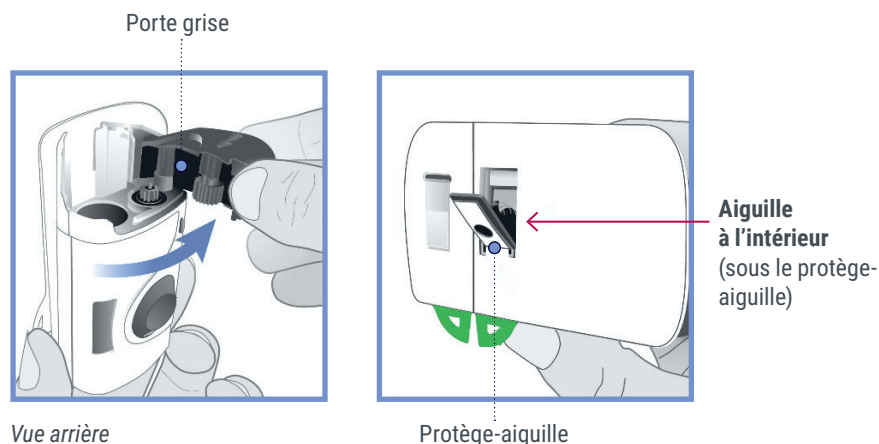

**Ouvrez complètement la porte grise :** faites pivoter la porte grise à fond vers la droite pour l'ouvrir.


! Si la porte grise ne s'ouvre pas, appuyez fermement sur les nervures (côté gauche de la porte) et faites pivoter la porte pour l'ouvrir.

✗ **Ne pas** fermer la porte grise avant que la cartouche soit chargée.  
**Évitez de toucher la zone du protège-aiguille à l'arrière de l'injecteur corporel. L'aiguille est derrière le protège-aiguille.**  
**Ne pas** toucher le bouton déclencheur gris avant d'être prêt à procéder à l'injection. Il n'est possible d'appuyer sur le bouton qu'**une seule** fois.

Placez l'injecteur corporel de côté.



Pour visionner la vidéo montrant comment préparer et vous injecter le médicament, flashez ce QR code à l'aide d'un smartphone ou consultez le site <https://www.abbvie.fr/nos-traitements/page-produits/Skyrizi.html>.

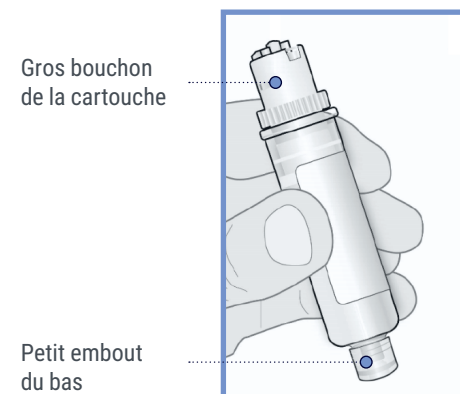

### Examinez la cartouche

Sortez avec précaution la cartouche de la barquette en plastique. L'injecteur corporel à usage unique ne doit être utilisé qu'avec la cartouche de SKYRIZI®.



#### • Examinez la solution

La solution doit avoir un aspect incolore à jaune et peut contenir de minuscules particules blanches ou transparentes. Il est normal d'apercevoir quelques bulles.



**Ne pas** utiliser si la solution est trouble, présente une coloration anormale ou contient des flocons ou de grosses particules.  
**Ne pas** utiliser si la solution a été congelée (même si elle a été décongelée par la suite).



#### • Examinez la cartouche


Vérifiez que les pièces de la cartouche et le plastique transparent ne sont pas fissurés ou brisés.



**Ne pas** tourner ou retirer le bouchon de la cartouche.  
**Ne pas** utiliser la cartouche si elle est tombée, si des pièces manquent ou si elle est endommagée.

# L'injection sous-cutanée de SKYRIZI® étape par étape<sup>1</sup>

## ÉTAPE 2 - Préparation de l'injecteur corporel (suite)

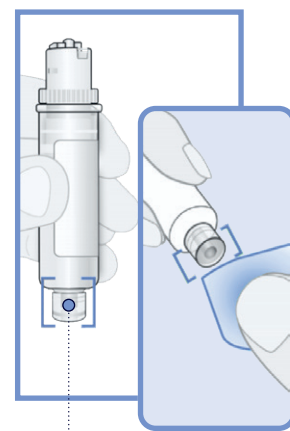

Nettoyez le centre du petit embout du bas

Petit embout du bas

Localisez le petit embout du bas de la cartouche.  
**Nettoyez-le** avec une compresse imprégnée d'alcool.  
Veillez à nettoyer le centre du petit embout du bas de la cartouche.




**Ne pas** toucher le petit embout du bas de la cartouche après l'avoir nettoyé.



Pour visionner la vidéo montrant comment préparer et vous injecter le médicament, flashez ce QR code à l'aide d'un smartphone ou consultez le site <https://www.abbvie.fr/nos-traitements/page-produits/Skyrizi.html>.

Insérez la cartouche verticalement

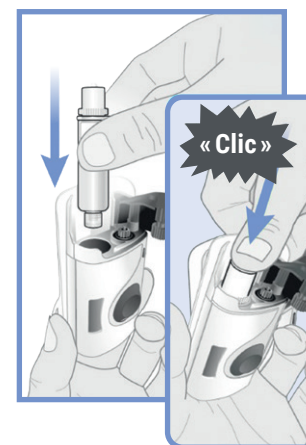

**Chargez la cartouche nettoyée dans l'injecteur corporel.**  
Insérez d'abord le petit embout du bas de la cartouche dans l'injecteur corporel.



**Ne pas** tourner ou retirer le bouchon de la cartouche.  
**Ne pas** toucher le bouton déclencheur gris avant d'être prêt à procéder à l'injection. Il n'est possible d'appuyer sur le bouton qu'**une seule fois**.

**Appuyez fermement sur la cartouche jusqu'à entendre un « clic » et qu'elle soit complètement insérée.**



Après avoir chargé la cartouche, vous pourrez voir quelques gouttes de médicament à l'arrière de l'injecteur corporel. Ceci est normal.

Veillez à passer immédiatement à l'étape suivante après avoir chargé la cartouche.  
Si vous attendez, la solution sèchera et l'injecteur corporel ne fonctionnera plus.

Pour une information complète sur les instructions d'utilisation de l'injecteur corporel,

veuillez vous référer à la notice de SKYRIZI® 360 mg solution injectable en cartouche.

Préparation de l'injecteur corporel

2


3

4

5

# L'injection sous-cutanée de SKYRIZI® étape par étape<sup>1</sup>

## ÉTAPE 2 - Préparation de l'injecteur corporel (suite)

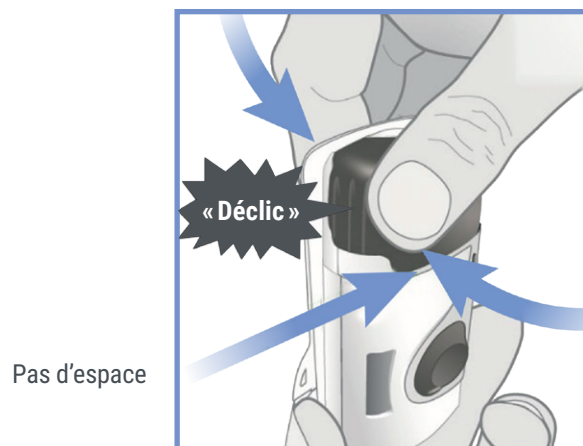

**Vérifiez que la cartouche est chargée et fermez la porte grise :** vérifiez que la cartouche est complètement insérée et faites pivoter la porte grise vers la gauche, puis appuyez fermement et attendez le déclic indiquant que la porte est fermée. La porte grise doit rester verrouillée après le chargement de la cartouche.

❌ **Ne pas** fermer la porte grise si la cartouche n'est pas complètement insérée ou n'est pas présente. Il ne doit pas exister d'espace entre la porte grise et l'injecteur corporel.


**Ne pas** toucher le bouton déclencheur gris avant d'être prêt à procéder à l'injection. Il n'est possible d'appuyer sur le bouton qu'**une seule** fois.

Passez immédiatement à l'étape suivante.



Pour visionner la vidéo montrant comment préparer et vous injecter le médicament, flashez ce QR code à l'aide d'un smartphone ou consultez le site <https://www.abbvie.fr/nos-traitements/page-produits/Skyrizi.html>.

## ÉTAPE 3 - Préparation de l'injection

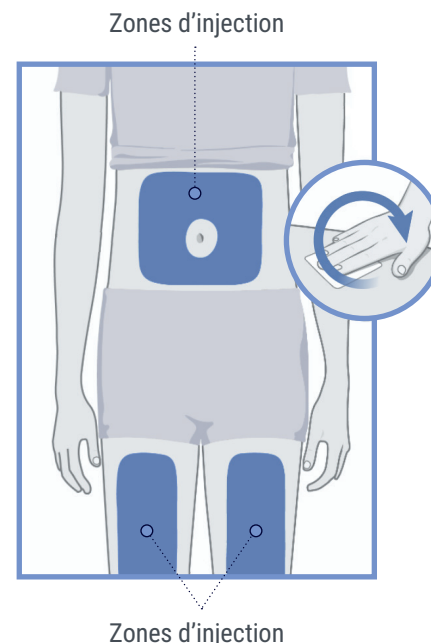

Choisissez l'une des 3 zones d'injection suivantes :

- sur le dessus de la cuisse gauche ;
- sur le dessus de la cuisse droite ;
- le ventre (abdomen) à au moins 5 cm du nombril.



**Ne pas** injecter dans une zone de peau présentant naturellement un pli ou un renflement car l'auto-injecteur pourrait se détacher et tomber.



Avant l'injection, nettoyez le site d'injection en faisant un mouvement circulaire en forme d'escargot avec une compresse imprégnée d'alcool. Laissez sécher la peau avant de placer l'injecteur corporel dessus. Vous pouvez raser les poils sur le site d'injection.



**Ne pas** toucher le site d'injection ou souffler dessus après l'avoir nettoyé.


**Ne pas** injecter le médicament au travers des vêtements.

**Ne pas** injecter le médicament là où la peau est sensible ou présente un hématome, une rougeur, un durcissement, une cicatrice, des vergetures, un grain de beauté ou une pilosité excessive.

# L'injection sous-cutanée de SKYRIZI® étape par étape<sup>1</sup>


## ÉTAPE 3 - Préparation de l'injection (suite)

Petite languette

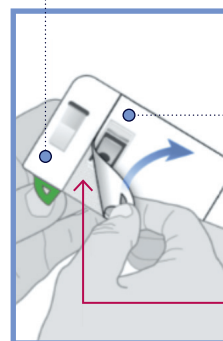

Grande languette

Aiguille à l'intérieur  
(sous le protège-aiguille)

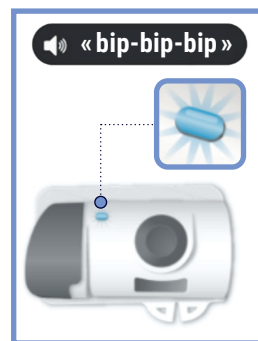

**Injecteur activé**  
Indicateur de statut clignotant en bleu.

Retournez l'injecteur corporel pour trouver les 2 languettes vertes. Détachez la grande languette verte pour mettre à nu la couche adhésive. Détachez la petite languette verte pour mettre à nu la couche adhésive. Lorsque la bande en plastique transparent sera retirée, l'injecteur corporel sera activé.



Vérifiez l'indicateur de statut lorsque l'injecteur corporel émet des bips. L'indicateur de statut clignotera en bleu lorsque l'injecteur corporel sera activé.



**Ne pas encore appuyer sur le bouton déclencheur gris.**

**Ne pas** toucher le protège-aiguille ou l'aiguille (à l'intérieur).

**Ne pas** retirer l'adhésif présent sur l'injecteur corporel ni laisser la face adhésive se replier et se coller.

**Si l'indicateur de statut ne clignote pas en bleu, ou s'il clignote en rouge et bip, cela signifie que l'injecteur corporel ne fonctionne pas correctement. Ne continuez pas à l'utiliser.**




Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère pour obtenir de l'aide et déterminer la conduite à tenir. Si l'injecteur corporel est fixé sur votre peau, retirez-le délicatement.

**L'injecteur corporel de SKYRIZI® doit être placé sur la peau et l'injection doit débuter dans les 30 minutes suivant le retrait des languettes vertes ; sinon, le dispositif ne fonctionnera pas. Veillez à passer immédiatement à l'étape suivante.**



Pour visionner la vidéo montrant comment préparer et vous injecter le médicament, flashez ce QR code à l'aide d'un smartphone ou consultez le site <https://www.abbvie.fr/nos-traitements/page-produits/Skyrizi.html>.

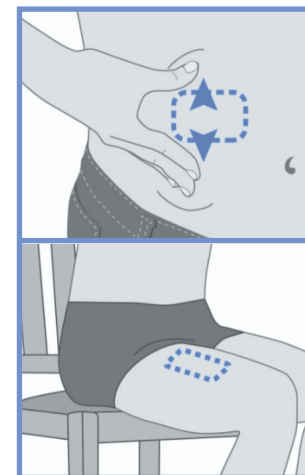

Pour le ventre (abdomen), tirez la peau et tenez-la de façon à créer une surface ferme et plate pour l'injection, à au moins 5 cm du nombril.



Veillez à être assis(e) avec le dos droit pour éviter la formation de plis et de renflements.


Il n'est pas nécessaire de tirer la peau pour l'aplatir pour les injections sur le dessus de la cuisse gauche ou droite.

Pour une information complète sur les instructions d'utilisation de l'injecteur corporel,

veuillez vous référer à la notice de SKYRIZI® 360 mg solution injectable en cartouche.

# L'injection sous-cutanée de SKYRIZI® étape par étape<sup>1</sup>

## ÉTAPE 3 - Préparation de l'injection (suite)

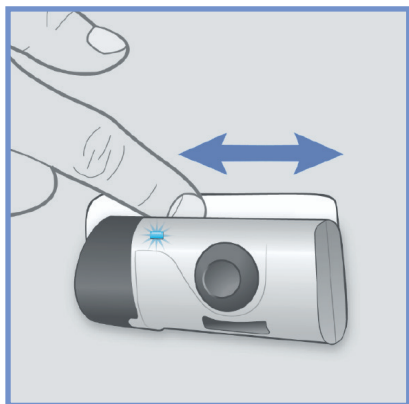

Veillez à placer l'injecteur corporel sur votre peau de façon à voir l'indicateur de statut bleu.

Lorsque la lumière bleue clignote, l'injecteur corporel est prêt. Placez l'injecteur corporel sur la peau nettoyée avec l'indicateur de statut visible. Faites glisser un doigt sur l'adhésif pour bien le fixer.



**Ne pas** placer l'injecteur corporel sur les vêtements. Il ne doit être placé que sur la peau nue.


**Ne pas** déplacer ni ajuster l'injecteur corporel après qu'il a été placé sur la peau.

Passez immédiatement à l'étape suivante.



Pour visionner la vidéo montrant comment préparer et vous injecter le médicament, flashez ce QR code à l'aide d'un smartphone ou consultez le site <https://www.abbvie.fr/nos-traitements/page-produits/Skyrizi.html>.

## ÉTAPE 4 - Injection de SKYRIZI®

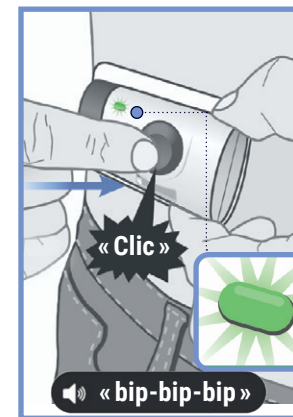

Déclenchez l'injection : **appuyez fermement** sur le bouton déclencheur gris jusqu'à entendre un « clic ». Puis relâchez le bouton. Vous pourrez ressentir une pique d'aiguille.



Vérifiez l'indicateur de statut lorsque l'injecteur corporel émet des bips.

Après le début de l'injection, l'indicateur de statut clignotera en vert en continu.

Une fois l'injection commencée, vous entendrez un son de pompage au fur et à mesure que l'injecteur corporel délivre le médicament.



**Ne pas** continuer à utiliser l'injecteur corporel si l'indicateur de statut clignote en rouge et bipe. Dans ce cas, retirez délicatement l'injecteur corporel et adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère afin de déterminer la conduite à tenir.



**Ne pas** toucher le bouton déclencheur gris avant que l'injecteur corporel chargé de la cartouche soit placé sur votre peau et que vous soyez prêt pour l'injection. Il n'est possible d'appuyer sur le bouton qu'**une seule** fois.

Pour une information complète sur les instructions d'utilisation de l'injecteur corporel,

veuillez vous référer à la notice de SKYRIZI® 360 mg solution injectable en cartouche.

# L'injection sous-cutanée de SKYRIZI® étape par étape<sup>1</sup>

## ÉTAPE 4 - Injection de SKYRIZI® (suite)

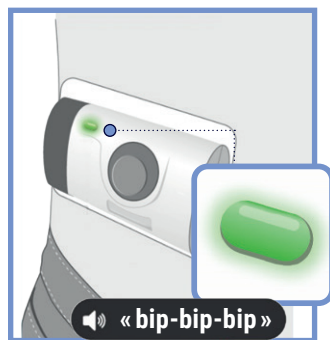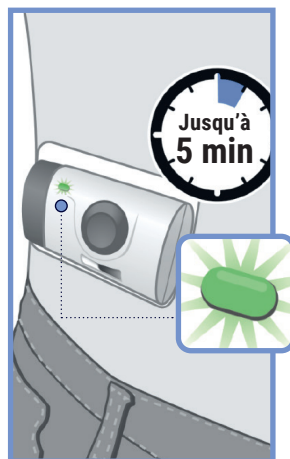

Attendez la fin de l'injection.  
L'injection de la pleine dose du médicament peut prendre jusqu'à 5 minutes.

### L'injection est terminée lorsque :

- L'injecteur corporel s'arrête automatiquement.
- Vous entendez un bip et l'indicateur de statut passe au vert fixe.

! Pendant l'injection, l'indicateur de statut continuera à clignoter en vert. Vous entendrez un son de pompage au fur et à mesure que l'injecteur corporel continue à délivrer le médicament. 


### L'activité physique doit être limitée pendant l'injection.

Une activité physique modérée, par exemple marcher, tendre la main ou se pencher, est possible pendant l'injection.

✗ **Ne pas** continuer à utiliser l'injecteur corporel si l'indicateur de statut clignote en rouge et bipe. Dans ce cas, retirez délicatement l'injecteur corporel et adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère afin de déterminer la conduite à tenir.



Pour visionner la vidéo montrant comment préparer et vous injecter le médicament, flashez ce QR code à l'aide d'un smartphone ou consultez le site <https://www.abbvie.fr/nos-traitements/page-produits/Skyrizi.html>.

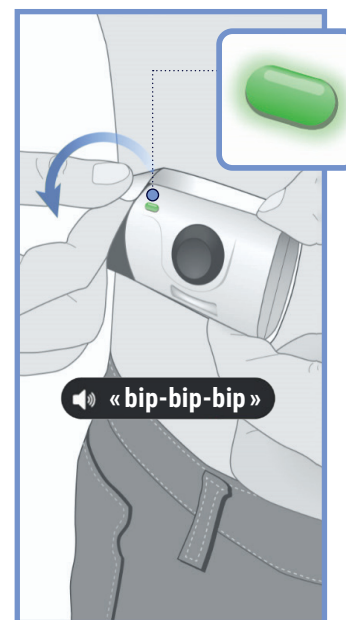

Lorsque l'injection est terminée, retirez délicatement l'injecteur corporel en tenant l'adhésif par le coin.

✗ **Ne pas** retirer l'injecteur corporel si l'indicateur de statut clignote en vert et que l'injection n'est pas terminée.

✗ **Ne pas** placer les doigts sur la face arrière de l'injecteur corporel pour le détacher de la peau.

Evitez de toucher le protège-aiguille ou l'aiguille à l'arrière de l'injecteur corporel.

Après avoir retiré l'injecteur corporel, vous entendrez plusieurs bips et l'indicateur de statut s'éteindra.

Le protège-aiguille recouvrira l'aiguille pendant le retrait de l'injecteur corporel.

! Il est normal de voir quelques gouttes de solution sur la peau après le retrait de l'injecteur corporel.

Maintenez une boule de coton ou une compresse de gaze appuyée à l'endroit de l'injection pendant 10 secondes.

✗ **Ne pas** frotter le site d'injection.

! Un léger saignement au site d'injection est normal.


Passez à l'étape suivante.

Pour une information complète sur les instructions d'utilisation de l'injecteur corporel,

veuillez vous référer à la notice de SKYRIZI® 360 mg solution injectable en cartouche.

# L'injection sous-cutanée de SKYRIZI® étape par étape<sup>1</sup>

## ÉTAPE 5 - Fin du processus

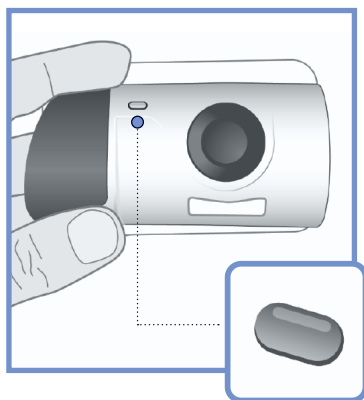

Examinez la fenêtre de visualisation du médicament et l'indicateur de statut. Vérifiez que le piston blanc remplit toute la fenêtre de visualisation du médicament et que la lumière verte fixe s'éteint, ce qui vous indique que tout le médicament a été injecté.

**Si le piston blanc ne remplit pas toute la fenêtre, adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.**



Pour visionner la vidéo montrant comment préparer et vous injecter le médicament, flashez ce QR code à l'aide d'un smartphone ou consultez le site <https://www.abbvie.fr/nos-traitements/page-produits/Skyrizi.html>.

Collecteur d'aiguilles



Laissez la cartouche dans l'injecteur corporel.

Jetez l'injecteur corporel usagé dans un collecteur spécifique à l'élimination des aiguilles immédiatement après utilisation. L'injecteur corporel contient des piles, des composants électroniques et une aiguille.



**Ne pas réutiliser la cartouche ni l'injecteur corporel.**  
**Ne pas jeter l'injecteur corporel usagé avec les ordures ménagères.**

Votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère vous indiquera comment restituer le collecteur, une fois ce dernier rempli.

Pour une information complète sur les instructions d'utilisation de l'injecteur corporel,

veuillez vous référer à la notice de SKYRIZI® 360 mg solution injectable en cartouche.

# Informations importantes



Inscrivez les dates des injections sur votre calendrier afin de savoir quand injecter SKYRIZI®.



**Rapportez le médicament à la pharmacie si :**

- La date de péremption (EXP) est dépassée.
- La solution a été congelée (même si elle a été décongelée par la suite).
- La cartouche ou l'injecteur corporel sont tombés ou ont été endommagés.
- La boîte présente des déchirures (même au niveau des perforations).
- L'opercule en papier blanc de la barquette est déchiré ou manquant.
- L'indicateur de statut dysfonctionne ou clignote en rouge.

## Questions fréquentes

**Que faire en cas d'oubli de dose de SKYRIZI® 360 mg, solution injectable en cartouche ?**

Afin de ne pas oublier votre injection et la commande de votre traitement à la pharmacie, vous pouvez, par exemple, programmer des rappels dans votre téléphone portable. Si vous oubliez d'utiliser SKYRIZI®, injectez la dose oubliée dès que vous vous en apercevez. En cas de doute, consultez votre médecin.

**Que faire si vous avez utilisé plus de SKYRIZI® que vous n'auriez dû ?**

Si vous avez utilisé plus de SKYRIZI® que vous n'auriez dû ou si une dose vous a été administrée plus tôt que prévu par la prescription, consultez votre médecin.

**Comment déclarer un effet indésirable ?**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice de SKYRIZI®.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration sur le site :

<https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament. <sup>1</sup>

**Voyager avec SKYRIZI® 360 mg, solution injectable en cartouche ?**

- Emportez votre traitement SKYRIZI® pour toute la durée du séjour. Prenez les documents utiles suivants :
  - Votre ordonnance de SKYRIZI®
  - La notice de SKYRIZI®
  - Le guide pratique d'auto-injection de SKYRIZI®
- Pour faciliter les contrôles douaniers, il est recommandé de conserver avec vous un certificat de votre médecin (exemple de certificat en page 35, avec notamment le nom de la substance active du médicament en « dénomination commune internationale » (DCI), en français et en anglais). <sup>3</sup>
- Si vous voyagez en avion, gardez votre médicament SKYRIZI® en cabine (en cas de perte de vos bagages mis en soute pendant le trajet) et en conditionnement isotherme pour le conserver à une température comprise entre +2 et +8 °C. <sup>3</sup>
- La quantité transportée de médicament ne doit pas excéder un usage personnel, correspondant à la durée de traitement prévue par l'ordonnance médicale. <sup>4</sup>
- S'il s'agit d'un long séjour, pensez à prévenir la pharmacie pour anticiper la commande du traitement.



# Calendrier d'injection

| Date d'injection | Site d'injection | Numéro de lot | Date d'expiration du lot |
|------------------|------------------|---------------|--------------------------|
|                  |                  |               |                          |
|                  |                  |               |                          |
|                  |                  |               |                          |
|                  |                  |               |                          |
|                  |                  |               |                          |
|                  |                  |               |                          |
|                  |                  |               |                          |
|                  |                  |               |                          |

| Date d'injection | Site d'injection | Numéro de lot | Date d'expiration du lot |
|------------------|------------------|---------------|--------------------------|
|                  |                  |               |                          |
|                  |                  |               |                          |
|                  |                  |               |                          |
|                  |                  |               |                          |
|                  |                  |               |                          |
|                  |                  |               |                          |
|                  |                  |               |                          |
|                  |                  |               |                          |

# Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Références

1. Information produit SKYRIZI® (notice).
2. DASRI. Disponible sur le site : <https://www.dastri.fr/> (consulté le 01/07/2023).
3. L'assurance maladie. Comment préparer sa trousse de médicaments pour partir en voyage ? Disponible sur le site : <https://www.ameli.fr/> (consulté le 01/07/2023).
4. Douanes et droits indirects. Vous voyagez avec des médicaments. Disponible sur le site : <https://www.douane.gouv.fr/> (consulté le 01/07/2023).

## Certificat médical pour les patients traités par SKYRIZI® (risankizumab) 360 mg, solution injectable en cartouche

### Medical certificate for patient treated by SKYRIZI® (risankizumab) 360 mg, solution for injection in cartridge

#### Informations sur le patient/la patiente – Patient information

Prénom Nom – First name Last Name .....

Date de naissance – Date of birth.....

Adresse – Address.....

#### Informations sur le médicament – Medication information

Nom – Name : SKYRIZI® (risankizumab)

Quantité totale transportée – Total quantity transported .....

#### Médecin prescripteur – Prescribing doctor

Nom – Name .....

Hôpital – Hospital.....

Téléphone – Phone .....

Le traitement de ce patient exige une administration régulière de SKYRIZI® (risankizumab). Elle/il doit toujours emporter avec elle/lui son traitement. Le traitement doit être conservé à température constante entre 2 °C et 8 °C. En cas de transport aérien, il doit être placé en cabine, si possible dans un réfrigérateur pendant le vol.  
*Treatment of this patient requires regular administration of SKYRIZI® (risankizumab). She/he must always keep her/his treatment with her/him. The treatment must be stored at a constant temperature between 2 °C and 8 °C. In a case of transport by air, it must be placed in the cabin, if possible in a refrigerator during the flight.*

#### Cachet et signature - Stamp and signature

abbvie

AbbVie  
SAS à associé unique au capital de 133 449 467,40 €  
RCS Nanterre 750 775 660  
Siège Social : 5/13 Boulevard de la République,  
92100 Boulogne-Billancourt

FR-SKZG-250078 - 01/2026



Pensez à récupérer SKYRIZI® auprès de votre pharmacie.



### Vidéo d'auto-injection de SKYRIZI®

Le QR code ci-contre vous permet d'accéder à une vidéo de démonstration des différentes étapes de l'administration de SKYRIZI®.



Pensez à récupérer gratuitement auprès de votre pharmacie le collecteur violet e-DASRI.<sup>2</sup>



### Service d'information médicale et scientifique

Pour une information plus détaillée, vous pouvez appeler le service d'information médicale et scientifique :

**0800 001 289**

Service & appel  
gratuits



### À propos de SKYRIZI®

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la notice de SKYRIZI® sur :

<http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/index.php?page=1&choixRecherche=medicament&txtCaracteres=SKYRIZI>  
ou sur [www.skyrizi.eu](http://www.skyrizi.eu)

**abbvie**



**BROCHURE**



AbbVie  
SAS à associé unique au capital de 133 449 467,40 €  
RCS Nanterre 750 775 660  
Siège Social : 5/13 Boulevard de la République,  
92100 Boulogne-Billancourt